

「Start Up」が初めての方に
おススメな3つの理由

- 絶妙なワックス量で、
歯と歯の間に通しやすく歯ぐきに優しい
- マイクロファイバーが配合されているので、
簡単に細菌が取り除ける
- 繊維が色つきで、
取れた細菌のかたまりが目で確認できる

「Start Up」に関する
詳しい使い方や
情報等については、
こちらから!!



<https://www.oralcare.co.jp/floss/>



fluorfloss
フロアフロス
Start Up

ワックス付 フロアフロス スタートアップ/40m

made in ITALY

「歯を守る」口腔ケア推進のパートナー 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9
 Oral Care ☎0120-500-418 ☎0120-500-518
<http://www.oralcare.co.jp>


● 無断での複写・複製、転載はお断りします。Copyright(C)2019. OralCare All Rights Reserved.
SK1903

初めて
フロスに
挑戦する方へ

fluorfloss

スタートアップ

Start Up

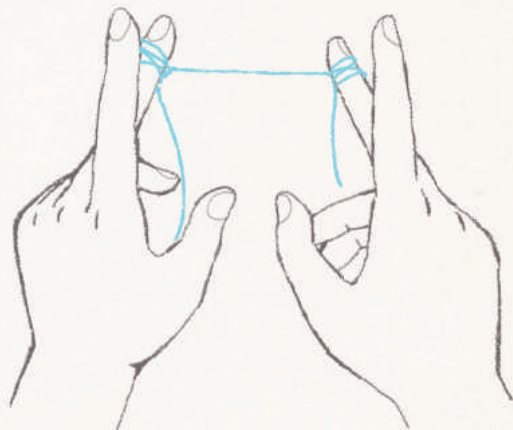





歯周病は歯ぐきの中にある細菌が原因で起こります。
この細菌を除去する唯一のツールがフロスです。
生涯健康で、美味しくご飯を食べ、
楽しくおしゃべりできるように——。
自分に合ったフロスを正しく使って、
歯ぐきのケアを始めませんか？

スタート アップ フロアフロス「Start Up」の使い方

- 1** まず、フロスを40～50センチ切り出し、
中指に巻きつけます(右中指に2～3回、
残りをすべて左中指に巻きつけます)。

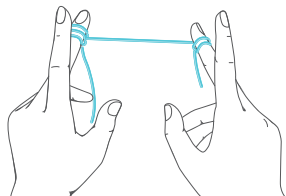

- 2** **最初に通すのは奥歯から**。中指に巻き
つけた糸を人差し指にひっかけ、ゆっく
りを入れます。

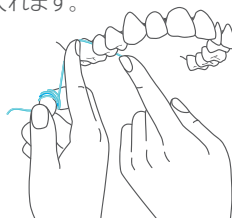

- 3** 歯ぐきの中1～2ミリまで入れ、「Cの字”
になるように歯を抱き込みます。上下
にゆっくり動かしながら、歯ぐきの中
に隠れている細菌をかき出します。



- 4** お掃除したところには、ごっそり取れ
た細菌が! **汚れたところを巻き取り、
キレイなところを出して次の場所を
お掃除しましょう。**

